


WORKSTATION PC İçin Gerekli Minimum Sistem Konfigürasyonu

- * Intel i5 Series CPU 9. nesil ve üstü
- * 8Gb DDR4 RAM
- * 120 Gb SSD (işletim sistemi için)
- * 500 Gb 7200Rpm 64Mb Cache HDD (veri depolama)
- * 2Gb. ATI AMD R7 240 VGA
- * 24x DVD-RW
- * Windows 10 Pro 64Bit OS
- * Anakart üzerindeki hariç ekstra bir adet
10/100/1000 Gigabit Ethernet
- * Anakart üzerinde en az bir adet
PCI-e 3.0 x1 Genişleme Slotu
- * 21.5" Led HD Monitör


BAĞLANTI BİLGİLERİ

- * Panoramik röntgen ile PC arasına;
2 ad. CAT 6 Data Kablosu
- * Panoramik röntgen ile Şutlama Butonu arasına; (Odanın dışarısına)
1 ad. CAT 6 Data Kablosu çekilerek data prizi ile sonlandırma
- * PC ile klinik Network'ü (Modem, Hub, Switch vs.) arasına;
1 ad. CAT 6 Data Kablosu
- * Panoramik röntgen elektrik bağlantısı için;
1 ad. 3 x 1,5 TTR Kablo
- * Panoramik röntgen elektrik beslemesi için;
Minimum 3 kVA Online UPS olması gerekmektedir.
- * Bırakılan kablo payları, panoramik röntgen tarafında minimum 3m.
Bilgisayar tarafında minimum 1m. olmalıdır.
- ** Workstation PC odanın içerisinde veya dışarısında bulunabilir.
- *** Şutlama butonu, kurşun kaplı odanın dışarısında olmak zorundadır.

BAĞLANTI ŞEMASI

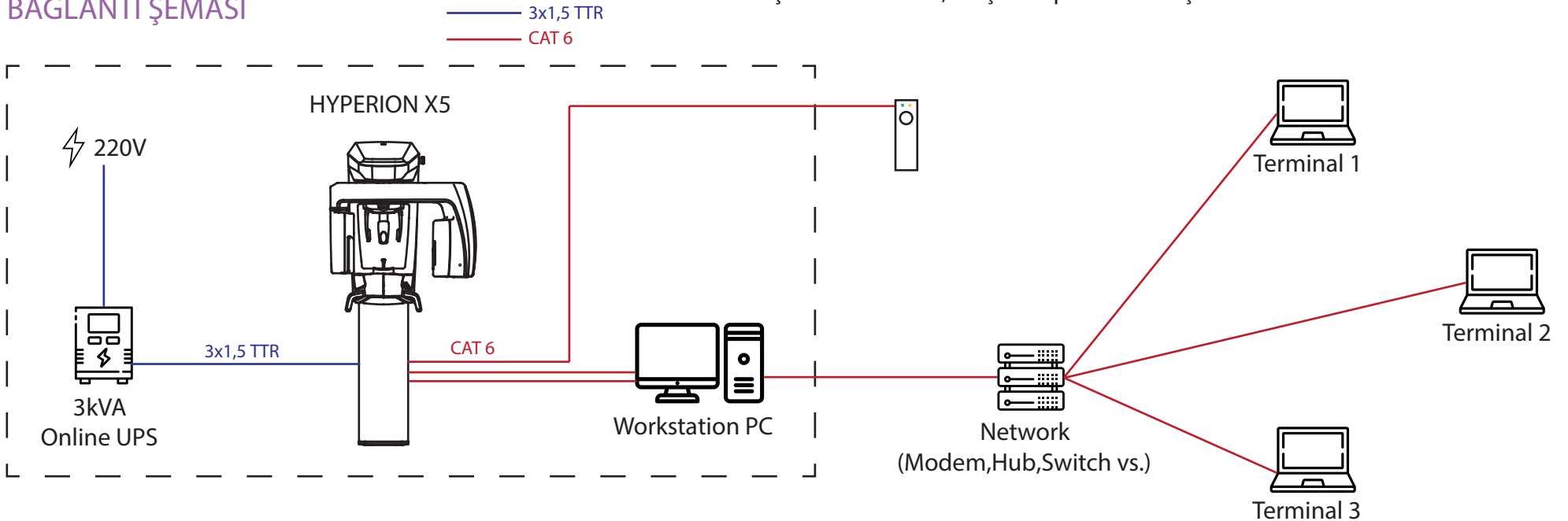

CİHAZ BOYUTLARI

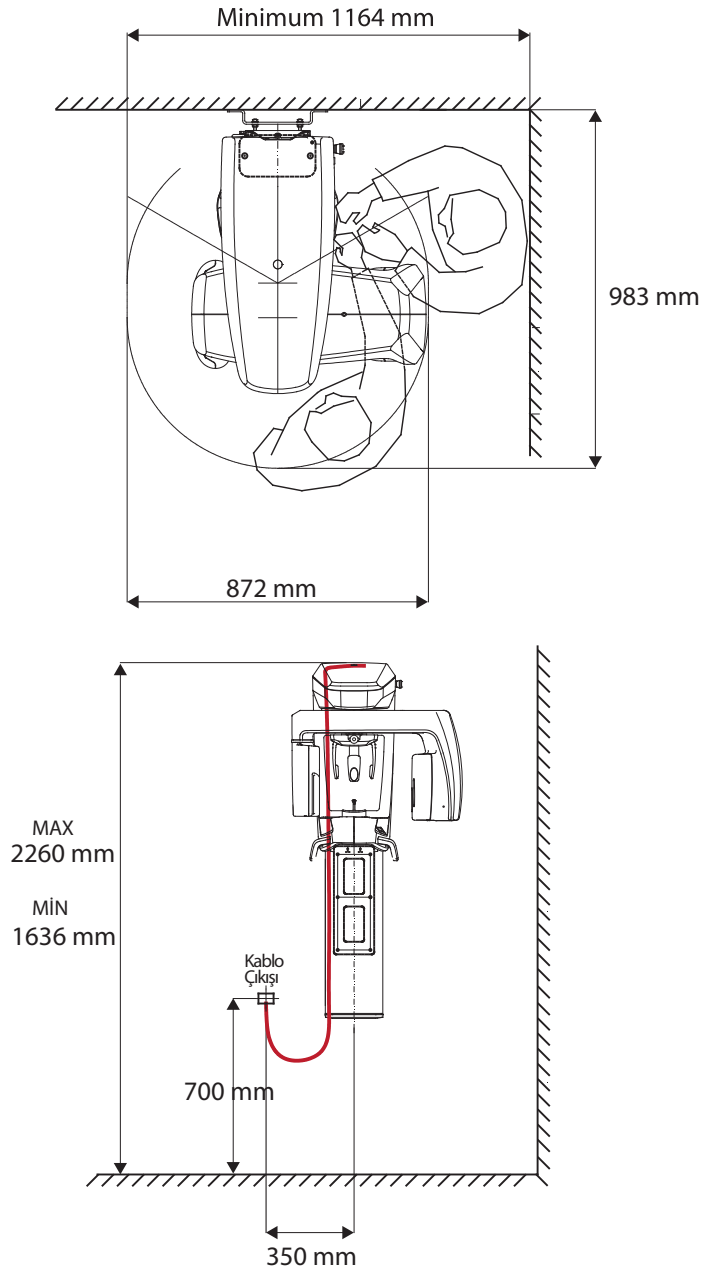

PLATFORM + MONTAJ ŞABLONU

Cihazın monte edileceği duvarın BETON OLMADIĞI DURUMLARDA GEREKLİDİR !

